


MANICO KEELER C



LEGGERE E SEGUIRE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI

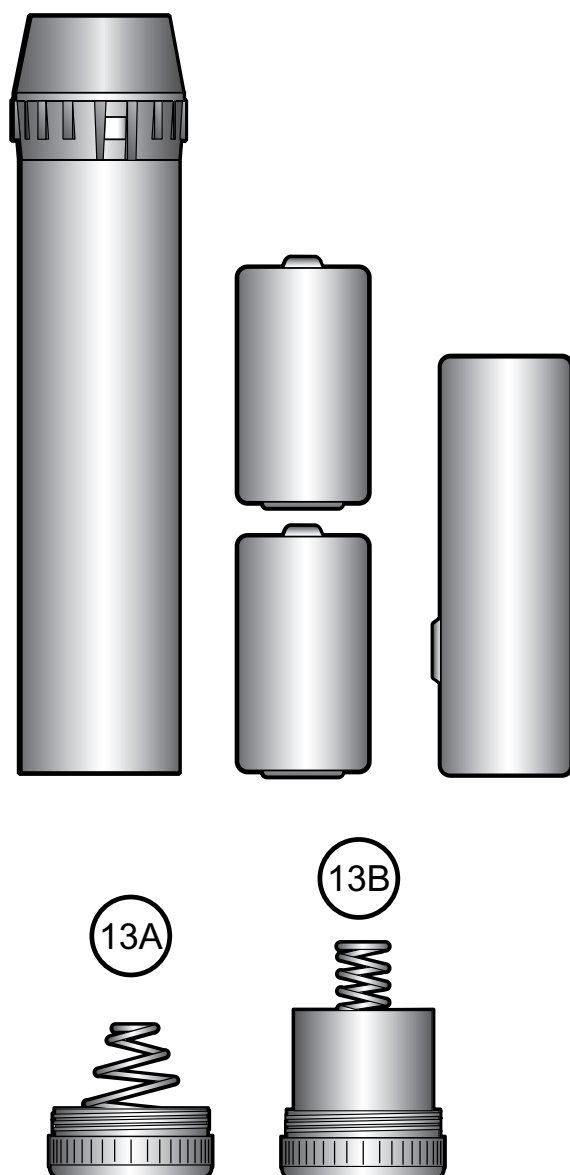

Manico Keeler C

Leggete attentamente la presente Sezione sulle Istruzioni prima di utilizzare il prodotto Keeler da Voi acquistato.

Per la Vostra sicurezza e quella dei Vostri clienti, Vi invitiamo a seguire tutte le informazioni fornite nella presente sezione, intese ad evidenziare potenziali pericoli alla sicurezza associati all'incorretto utilizzo del prodotto integro o danneggiato.



Avvertenza

Non utilizzare il prodotto in presenza di gas infiammabili.

Non smontare o modificare la batteria, al cui interno non sono presenti parti soggette a manutenzione.

Non smaltire la batteria in un fuoco vivo né perforarla.

Non utilizzare una batteria deformata, che presenti segni di perdite, corrosa o visibilmente danneggiata.

Se il prodotto emana odore anomalo, calore o fumo, interromperne l'utilizzo immediatamente. L'uso continuo di un prodotto o componente danneggiato può provocare danni alle persone o alle proprietà.

Non immergere l'unità in alcun liquido.

Non usare l'unità se danneggiata e controllarla periodicamente per individuare eventuali segni di danni.

Nel caricatore Keeler, usare solo manici Keeler (base rossa). Non cercare di inserire un manico Keeler con la base blu nei caricatori Keeler. Fare riferimento alla sezione sull'identificazione dei manici e delle lampadine Keeler.

Attenzione

Se lo strumento non viene usato per un lungo periodo rimuovere le batterie a secco.

Usare solo la batteria ricaricabile Keeler – N. parte 1919-P-7069

Caricare con i caricatori Keeler.

Non usare tipi di batterie diversi.

Non caricare la batteria in ambienti la cui temperatura possa eccedere i 40°C o scendere al di sotto di 0°C.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non inserire in una presa di alimentazione danneggiata.

Da usarsi solo all'interno di ambienti (proteggere dall'umidità).

Onde impedire la formazione di condensa, lasciare che lo strumento raggiunga la temperatura ambiente prima dell'utilizzo.

Quando si fissano le teste degli strumenti ai manici controllare che il voltaggio della lampadina corrisponda al voltaggio del manico.


Assicurarsi che a completamento dell'esame il controllo sia nella posizione *off*.

Quando si sostituisce la cella al ricaricabile, ruotare il manico nella posizione *off* e inserire una nuova cella. Rimontare il tappo inferiore e inserire il manico nell'alloggiamento di carica.

Informazioni ambientali


Smaltire la batteria conformemente ai regolamenti locali sul riciclaggio delle batterie.

Picchiettare sui contatti della batteria onde evitare cortocircuiti durante lo smaltimento.

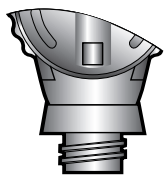


Connessione della testa dello strumento al manico


La connessione della testa dello strumento al manico avviene tramite una vite filettata. Connettere come indicato e ruotare in senso orario. Assicurarsi che la connessione fra la testa e il manico sia positiva.

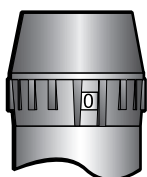

SPENTO

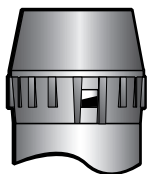

ACCESO A META

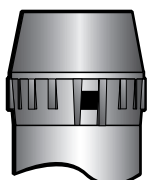

COMPLETAMENTE
ACCESO

Compatibilità

Gli Oftalmoscopi Specialist, Professional, Standard e Practitioner Keeler e i Retinoscopi Keeler sono compatibili con i manici Keeler Vista 2.8v e 3.6v.

Controllo illuminazione on/off

Per accendere lo strumento ruotare il controllo illuminazione a destra come indicato. Per spegnere lo strumento ruotare il controllo a sinistra come indicato. I manici Keeler misura C sono provvisti di indicatore della potenza, il quale avverte se lo strumento è acceso o spento.

Rosso = acceso Argento = spento

Identificazione del manico

I manici Keeler misura C vengono individuati con un codice di colori che permette di distinguere fra un manico con batterie a secco (2.8v) e un manico ricaricabile (3.6v). Il codice di colori è il seguente:

Base blu	=	2.8v per batterie a secco	(13A)
Base rossa	=	3.6v per batterie ricaricabili	(13B)

Per le lampade Keeler viene impiegato lo stesso codice colori.

Base blu = 2.8v. per le batterie a secco.

Base rossa = 3.6v per batterie ricaricabili.



Durante la sostituzione di batterie e lampade assicurarsi che il voltaggio corrisponda a quello richiesto dal manico. Eliminare le batterie esaurite in modo sicuro in conformità con le regolamentazioni locali.

Inserimento/Sostituzione batterie.

Svitare il coperchio del comparto batterie, inserire le batterie e richiudere nel modo indicato.

Utilizzare le batterie a secco qui sotto indicate:

Manico Keeler C - batterie 2 x 1.5v C. -

Duracell MN 1400 o equivalente

Facciamo notare che i manici ricaricabili Keeler sono normalmente forniti di batteria ricaricabile (3.6v - 0.7Ah Ni-Cd).

Da manico a batteria a manico ricaricabile.

Il manico Keeler con batteria a secco 2.8 v C (base blu) può essere trasformato in manico ricaricabile 3.6v (base rossa). Per informazioni sulle parti richieste vedere la sezione accessori.

Facciamo notare che anche la lampada dello strumento dovrà essere potenziata da 2.8v to 3.6 v. Per informazioni dettagliate contattare Keeler Service: tel. 01753 857177.

Istruzioni Per Caricare I Manici Keeler Misura C Ricaricabili



Avvertimento

Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.

Utilizzo batterie

È importante sapere come utilizzare batterie ricaricabili Keeler nuove, ai fini di ottenere la massima durata. Seguire le istruzioni come indicato:

1. Caricare completamente la batteria ricaricabile Keeler nuova. Il tempo di carica è di circa 15 ore.
2. Usare lo strumento **SENZA RICARICARE FINO A CHE LA BATTERIA NON SIA COMPLETAMENTE ESAURITA**.
3. Quando la batteria è esaurita ricaricare completamente. Tempo di carica circa 15 ore.

Ripetere l'operazione (puni 1, 2, 3) tre volte, cioè caricare e scaricare la batteria tre volte per completare la preparazione.

Dopo aver completato l'operazione come indicato, potrete mettere lo strumento nel caricatore fra un esame e l'altro, quando cioè non è in funzione.

Compatibilità del caricatore

I Manici Ricaricabili Keeler possono essere usati nei seguenti caricatori Keeler:

La gamma di caricatori Vista (singoli, doppi, mobili)

Caricatore Mini Keeler

Caricatore Duo Keeler.

Raccomandiamo di usare sempre una corrente di carica fra quelle indicate.

Caricabatterie di altre marche



Avvertimento

Caricare il manico Keeler solo con un caricabatteria la cui corrente massima è limitata a 65 mA.



I manici ricaricabili Keeler misura C possono essere usati con la maggior parte di caricatori. Per caricare lo strumento in un caricabatteria di una marca diversa, assicurarsi innanzitutto che la corrente di carica sia limitata a 65 mA. Quindi rimuovere la parte centrale del coperchietto di base usando una moneta. Fatto ciò, il manico Keeler può essere caricato per mezzo di un caricatore di marca diversa.

Istruzioni per la pulizia

Per lo strumento, eseguire unicamente una pulizia manuale, come qui sotto descritta, senza immergere l'unità in alcun liquido:

1. Detergere la superficie esterna con un panno pulito ed assorbente, che non lasci peli, inumidito con una soluzione di acqua/detergente (2% di detergente per volume d'acqua) oppure una soluzione di acqua e alcol isopropilico (70% IPA per volume d'acqua).
2. Assicurarsi che un eccesso di soluzione non penetri nello strumento. Fare attenzione che il panno non sia troppo bagnato.
3. Le superfici devono essere asciugate attentamente usando un panno pulito che non lasci peli.
4. Non disperdere la soluzione nell'ambiente dopo l'uso, ma eliminarla in modo sicuro.

Garanzia e manutenzione

Il prodotto non contiene parti sulle quali l'utente può effettuare la manutenzione – tutte le operazioni di manutenzione preventiva e servizio devono essere eseguite unicamente da rappresentanti autorizzati Keeler.

Il Vostro Manico Keeler è garantito per 3 anni e verrà sostituito o riparato gratuitamente, soggetto alle seguenti condizioni:

1. Qualsiasi guasto deve essere un guasto di fabbricazione.
2. Qualsiasi richiesta di sostituzione/riparazione deve essere corredata dalla ricevuta/scontrino di acquisto.

PRODOTTO NEL REGNO UNITO DA:

Keeler Limited

Clewer Hill Road

Windsor

Berkshire SL4 4AA

Inghilterra

Tel: +44 (0)1753 857177

Fax: +44 (0)1753 827145

NUMERO VERDE: 0800 521 251

DISTRIBUITO DA:

Keeler Instruments Inc

456 Parkway

Broomall

PA 19008, USA

Numero verde: 1 800 523 5620

Tel: 610 353 4350

Fax: 610 353 7814

Il marchio CE indica che
questo prodotto è stato
testato e risulta conforme
alle norme definite nella
direttiva 93/42/EEC sui
dispositivi medicali



A
HALMA GROUP
C O M P A N Y



Distributore